

クッションマッサージャー コリラック CTM-100A

KORILUCK


Cushion Massager

取扱説明書

- このたびはクッションマッサージャーコリラックCTM-100Aをお買い上げいただきましてありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 「安全上のご注意」をよくお読みになり十分に理解してください。
- 保証書を兼ねていますので、紛失しないようにしてください。

もくじ

安全上のご注意	1~2
各部のなまえとはたらき	3
ご使用方法	4
代表的なご使用例	5
お手入れのしかた	5
仕様／商品のお問い合わせ	6
故障かなとおもったら	6
保証規定／品質保証書	7

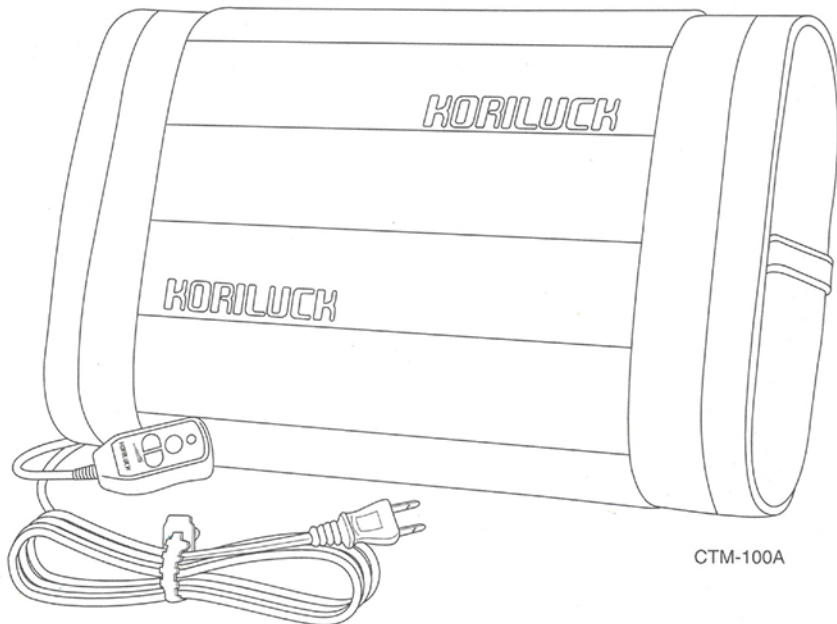

CTM-100A

安全上のご注意

- ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告サイン	内 容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例



△記号は注意（警告を含む）を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“感電注意”を示します。



○記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な注意内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“分解禁止”を示します。



●記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な注意内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“電源プラグを抜くこと”を示します。

⚠ 警告

次のような方の場合は、本製品をご使用にならないでください。
または医師とご相談の上、ご使用ください。

■医師の治療を受けているときや、身体に異常を感じているとき ■悪性腫瘍のある方 ■かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する場合 ■骨粗しょう症の方 ■心臓に障害のある方 ■妊娠中の方 ■体が不自由な方 ■熱の高い方 ■お子さま



体の頭、首、顔、胸部位へは本製品をご使用にならないでください。

■傷害及び骨折の原因になる可能性があります。

本体カバーを開けたり、製品の改造や分解および修理をしないでください。

■専門の技術者以外による分解や改造・修理を行った場合は、火災・感電及び事故の原因になります。
■製品に異常が発生した場合はすぐに電源を抜いて、購入した販売店または販売元に問合せをしてください。



本製品はAC100V専用製品です。AC100V電源を確認し、一つのコンセントに他の製品のプラグを同時に差し込んで使用しないでください。

■AC100Vで使用してください。■電源コンセントは15A以上の単独コンセントを使用してください。■火災及び感電事故の原因になります。



電源プラグを抜き差しするとき、濡れた手で触らないでください。

■濡れた手で電源プラグを触ると、感電する恐れがあります。



電源プラグにピン、ゴミや水分を付着させないようにしてください。電源コード線が破損された場合はすぐに使用を中止し、購入した販売店または販売元に問い合わせを行い、交換した後使用してください。



安全上のご注意


⚠ 注意

長時間製品を使用しない場合はコンセントから電源コードを抜いてください。 ■使用しない時、電源プラグを抜いておくことが不慮の事故を未然に防ぐ方法となります。	
使用途中激しい騒音が発生した場合はすぐに使用を中止して、購入した販売店または販売元に問い合わせをしてください。 ■使用中の激しい騒音は製品に異常が発生した場合に起こりますので、ただちに使用を中止してください。	
保護カバーを洗濯するため取り外す場合は、電源コードをコンセントから抜いた後、中性洗剤を使用し手洗いをしてください。また、マッサージ機の保護カバーがない状態では、絶対に使用しないでください。本体カバーは絶対開けないで下さい。	
本体やリモコンを水に濡らさないように注意してください。また体が濡れた状態でご使用にならないで下さい。 ■製品内部に異物質や水が入った場合はすぐに電源を抜いて、販売店または販売元での点検を受けた後、使用してください。製品損傷及び感電事故の原因になる可能性があります。	
保護カバーが外れていたり、本体カバーが破れた状態では絶対使用しないでください。 ■事故及び製品故障の原因になります。	
お子さまには使用させないでください。また、マッサージ機の作動中には、お子さまが近づかないように注意してください。 ■傷害及び骨折の原因になる可能性があります。	
製品にピン、針、釘等で刺したり刃物で傷をつけないでください。 ■事故及び製品故障の原因になります。	
キャスターが付いている回転椅子等のように、不安定な状態でご使用にならないでください。 ■マッサージ機の作動中、椅子が滑って事故が発生する可能性があります。	
このような場所で製品を使用したり保管しないでください。 ■使用及び保管禁止場所の例 ー 雨水や直射日光が入る場所 ー 湿度が高い場所 ー 電気ヒーター、ストーブのような熱源の近所 (2m以内使用禁止) ー 小さな虫などがいる場所 (虫などが製品の内部に入ると、電気ショートによる火災及び故障の原因になる可能性があります)。	
1日3回(30分)以上使用しないでください。 ■長時間使用した場合、摩擦により皮膚が損傷される恐れがあります。	
製品を30分以上続けて使用しないでください。 ■30分以上続けて作動させた場合、部品が過熱され故障を招く恐れがあります。 ■過熱した場合、電源スイッチを切り1時間以上経過した後、再作動してください。	

コリラック 安全装置

- 1. 自動停止機能** マッサージ機能設定後10分が経つと自動的に電源が切れ、ご使用者の不注意による事故を事前に防止します。
- 2. 過熱防止機能** バイメタル (bimetal) 温度センサーを適用し、繰り返して使用することによる機器の過熱状態を防止します。
- 3. 過電流遮断装置** 製品の使用中に故障や異常状態が発生した場合、自動的に電源が切れます。

各部のなまえとはたらき

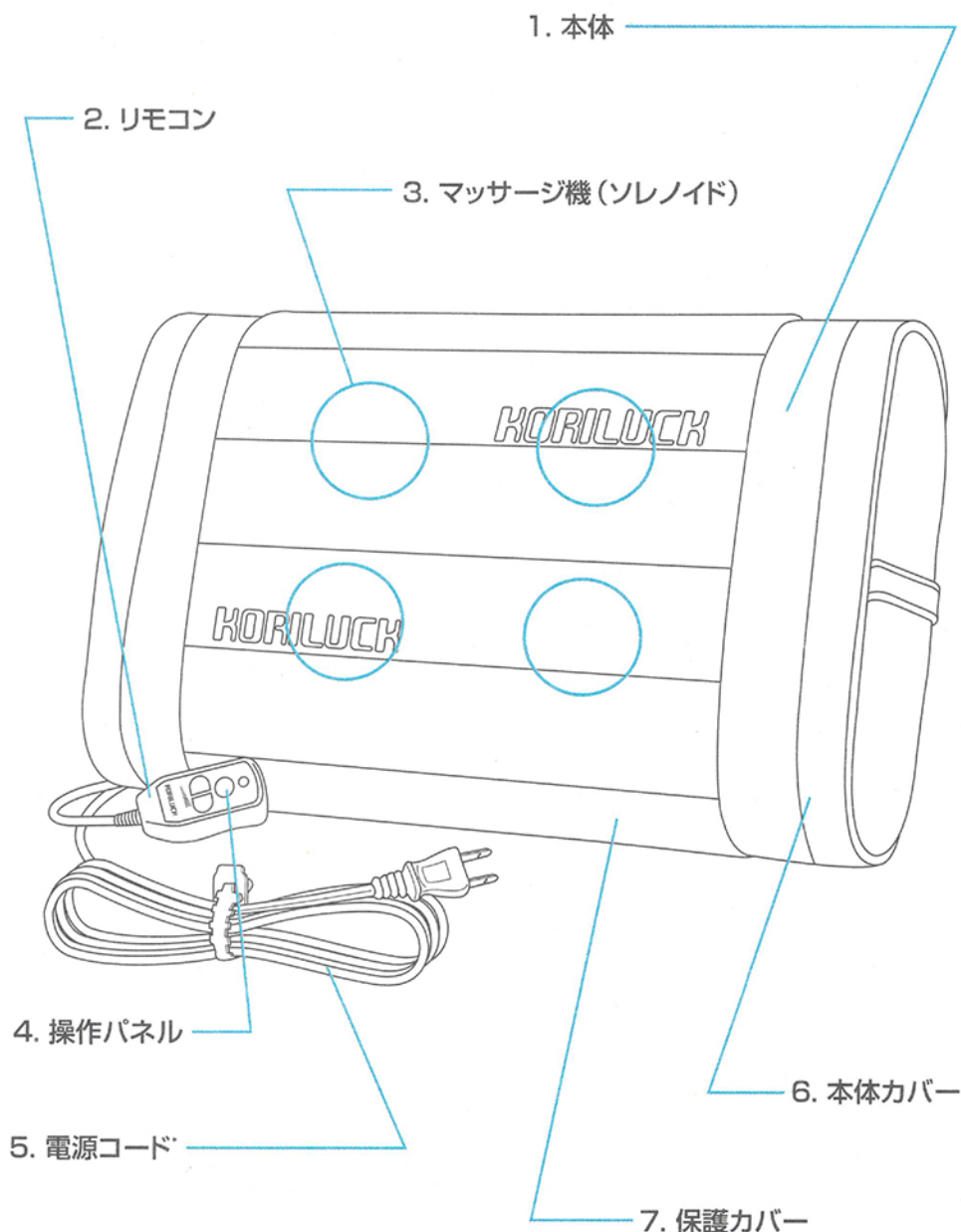


※カバーの縫い目のない方がマッサージ機能が働く表面です。
※保護カバーが外れていたり緩んだ状態、または本体カバーが破れた状態では使用しないでください。

使用方法

使用前の注意事項

- 本使用説明書の“安全上のご注意”を読んで、警告及び注意事項を熟知してください。
- マッサージする部位に合わせて正しい姿勢をとってください。
- 電源コードをコンセント(AC100V)に挿して電源スイッチをONにしてください。
- 操作パネル上段部にある電源ランプの点灯状態を確認してください。

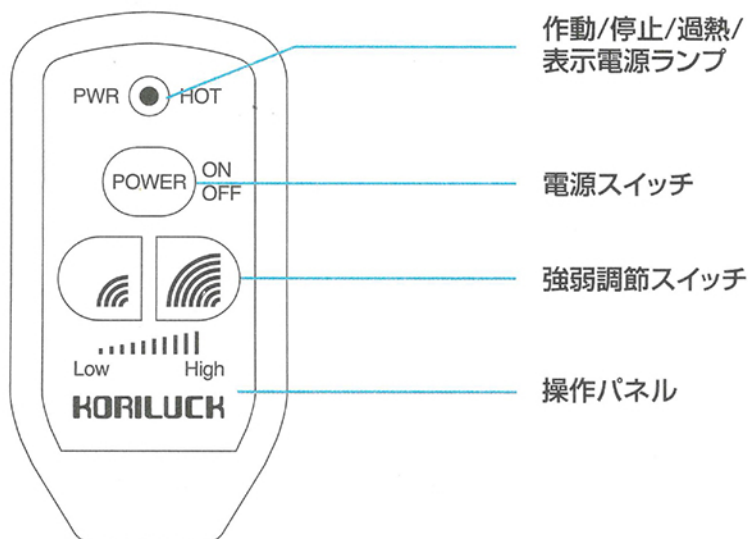

POWER

電源スイッチ

- マッサージ機の使用及び停止の時使用。使用中には電源ランプが点灯し、停止時にランプは消えます。
 - マッサージ機使用中に過熱遮断機能が作動した場合、電源スイッチを押すと初期状態になります。
- ※1回の使用時間は10分間に設定されています。それ以上時間が経過すると自動的に電源が切れます。(自動OFF時、2回ベルがなります。)



強調節スイッチ

- マッサージ強度を強く調節する機能で、使用中に連続して押すと強くなります。



弱調節スイッチ

- マッサージ強度を弱く調節する機能で、使用中に連続して押すと弱くなります。
- ※強～弱は7段階の調節ができます。



電源、動作時：緑色

- 正常動作のときは緑色のランプが点灯します。



過熱時：赤色

- 本製品の連続動作により過熱すると、赤色のランプがON/OFF(点滅)を繰り返し電源が遮断され動作が停止します。
- ※過熱遮断機能時は、5回ベルが鳴った後過熱表示ランプがON/OFF(点滅)を繰り返します。
- ※1時間以上経過し製品の温度が下がると正常動作します。

代表的なご使用例

1. 腰マッサージ




2. 足裏マッサージ



※必ず椅子に腰掛けて
ご使用ください。

3. ふくらはぎマッサージ

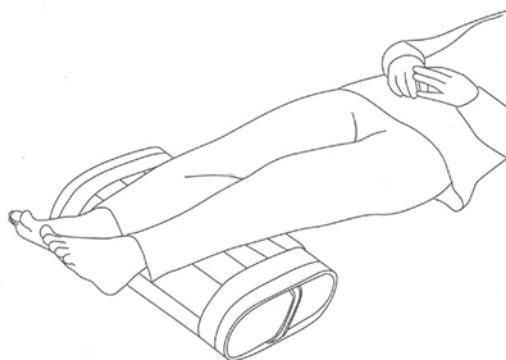

4. 肩マッサージ



警告

頭、顔、胸、首部位には絶対にマッサージしないでください。
傷害及び事故が発生する恐れがあります。

お手入れのしかた

お手入れの前に必ず電源コードを抜き、内部に水が入らないように注意してください。

- 保護カバー：汚れた場合、保護カバーを外して手洗いで洗濯してください。
- 本体カバー：水を含ませてかたく絞った布、または軽く中性洗剤を含ませた布でよく拭いてください。本体カバーは絶対に開けないで下さい。
- 移動の際は側面にある移動用取っ手を使用してください。



注意

電源コード及びリモコン線を引っ張ると、内部部品が
損傷され事故の原因になります。

仕様／商品のお問い合わせ

類 別	機械器具(77)パイプレーター
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器 (JMDN:34662000)
医療機器の区分	管理医療機器
販 売 名	コリラック
医療機器認証番号	221AGBZX00170000
型 番	CTM-100A
定 格 電 源	AC100V/50Hz-60Hz
定 格 消 費 電 力	48W
定 格 時 間	10分 (JIS規格に基づく休止時間 40分)
た た き 回 数	平均290回/分(50Hz)、平均350回/分(60Hz)
寸 法 ・ 重 量	W455×D120×H290(mm) 3kg
タ イ マ ー	10分
付 属 品	取扱説明書兼品質保証書
製 造 販 売 業 者	株式会社マルタカテクノ 静岡県藤枝市八幡字広通550番1
製 造 業 者	MOTION TECHNOLOGY CO., LTD. Korea

※お断りなく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※本器を廃棄する場合は、環境への影響を少なくするため、地域で定められている規則に従ってください。

商品又は修理に関するお問い合わせは

商品の使い方や疑問点などお気軽にお問い合わせください。

TEL 03-5821-7140 FAX 03-5821-5390

受付時間(土日祝日を除く)10:00~12:00/13:00~17:00

発売元：株式会社 **東京サライズ**

〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-12-6 サンライズビル

故障かなとおもったら

ご使用中に異常が生じた場合は、まず次の点をお調べください。

症 状	確認事項	処置事項
電源ランプが点灯されない。	電源が遮断されていないか。	電源コンセントにAC100Vが入力されているか確認してください。
	マッサージ機の使用後10分以上経過したのではないか。	リモコンパネル上段の電源ボタンを押してください。
強弱の調整ができない。	連続で使用し過熱しているのではないか。	長時間連続使用による過熱の可能性が高いので電源コードを抜いて、一定(1時間以上)時間後、再び電源コードを挿して再作動してください。
マッサージリズムが以前と違う。 過熱ランプ(赤色)が点灯する。ON/OFFが繰り返される。	連続で使用し過熱しているのではないか。	長時間連続使用による過熱防止センサーが動作中なので製品の作動を止めて1時間以上経過してから使用してください。

■使用方法により正しく使用しなかった場合、製品の故障でなくとも動作しない場合もあります。

■作動しない場合は、購入した販売店または発売元に点検を依頼してください。

■製品に異常が発生した場合はご自分で分解・修理せずに、必ず購入した販売店または発売元に問い合わせ、処理を依頼してください。修理ミスにより事故が発生する恐れがあります。

コリラック 保証規定

1. 取扱説明書にしたがった正常な使用状態でお買い上げ後1年以内に故障した場合には、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買上げの販売店または(株)東京サンライズまで依頼、送付してください。
3. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - イ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - ウ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および損傷。
 - エ) 本書の提示がない場合。
 - オ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - カ) 消耗部品(カバー類および内部ウレタンフォームを含みます)。
 - キ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
4. 本機の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
6. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

品質保証書

このたびは、コリラックをお買い求めいただきありがとうございます。

本機は厳重な検査を行い高品質を確保しております。

取扱説明書にしたがった正常なご使用において、万が一不具合が発生しましたときは、
保証規定によりお買い上げ後一年間は無償修理いたします。

株式会社東京サンライズ

〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-12-6
TEL 03-5821-7140

品 名：コリラック

型 番：CTM-100A

ご芳名：

ご住所：

TEL ()

お買い上げ店名：

住所：

TEL ()

お買い上げ年月日：

製造番号：