


ニュー フットウェル

フットマッサージャー ニューフットウェル

MD-1800S

取扱説明書 保証書付

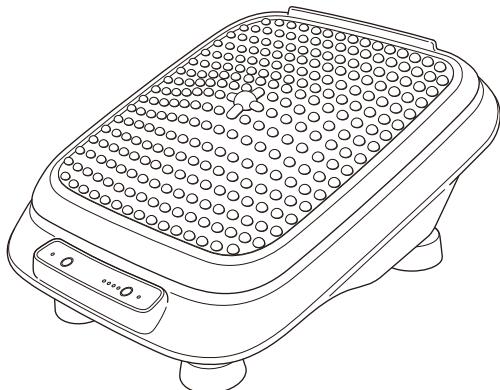

このたびはニューフットウェルをお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

使用目的
または
効果

あんま、マッサージの代用。

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

一般家庭で使用すること。

もくじ

● 安全上のご注意	1~4	● 保管について	7
● 各部の名称	5	● 故障かなと思ったら	7
● ご使用の前に	5	● 愛情点検について	8
● 使いかた	6	● 仕様	8
● 使用例	6	● アフターサービスについて	9,10
● お手入れについて	7	● 保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

!**警告**

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

!**注意**

人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



○記号は、「禁止」の行為を示しています。
(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制したり指示したりするものです。
(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

!**警告**



強制

医師の治療を受けているときや次の人には必ず医師に相談のうえ使用する。
●ペースメーカー等の電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人は
●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人
●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)
●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けんしよう(腱鞘)炎の人
●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
●本機を使用しても効果がみられない人
守らないと事故や体調不良をおこすことがあります。

交流100Vで使用する。
守らないと火災や感電の原因になります。

	<p>次の人は使用しない。 医師からマッサージを禁じられている人。 (例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎 および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) 症状を悪化させるおそれがあります。</p>
	<p>マッサージ以外の目的には使用しない。 また、頭、胸、腹、骨部へは使用しない。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>強く押しつけて使用しない。 皮膚や筋肉を痛めるおそれがあります。</p>
	<p>自分で意思表示できない人に使わせない。 事故やけがの原因になります。</p>
	<p>安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供(乳幼児以外)や補助を必要とする人に使わせない。 事故やけがの原因になります。</p>
	<p>子供には本体の上に乗らせたり遊ばせたりしない。 事故やけがの原因になります。</p>
	<p>本体ケースと振動板のすき間に指などを入れない。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。 感電やショート、火災の原因になります。</p>
	<p>電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。電源コードや電源プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店に修理を依頼する。 そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。</p>
	<p>電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。 また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。</p>
	<p>機器が故障したり、指圧突起部分が破損した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡する。 電源コードが破損した場合は危険ですのでお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに交換の依頼をする。 機器は改造しない。 火災や感電、けがの原因になります。</p>

安全上のご注意

⚠ 注意



強制

1日の使用時間は20分以内にする。
また、一箇所への連続使用は3分以内にする。
守らないと逆効果やけがのおそれがあります。

はじめは短い時間で使用する。
強い刺激に慣れていないと逆効果やけがの原因になります。

使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。
守らないと事故や体調不良を起こすおそれがあります。

使用後はスイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。
守らないと子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、
必ず電源プラグを持って引き抜く。
守らないと感電やショートのおそれがあります。

使用後は電源コードのねじれをほどいて保管する。
断線やショートの原因になります。

故障が見つかったら、すぐに使用を止め、電源を切る。
守らないと事故やけがのおそれがあります。



禁止

次のようなときは使用しない。
●疲労が激しいとき。 ●酒に酔っているとき。 ●湿疹が生じているとき。
体調不良を起こすおそれがあります。

食前、食後の1時間は使用しない。
体調不良を起こすおそれがあります。

肌の弱い人は素肌で使用しない。また大切な衣類の上からマッサージするときは
振動板にタオルなどをあてがい使用する。
事故やけがの原因になります。

他の治療器具と同時に使用しない。
体調不良を起こすおそれがあります。


使用中は眠らない。
事故やけがのおそれがあります。

フトンの中や、毛布をかぶせて使用しない。
発火やモーターの温度上昇の原因になります。


ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。
火災のおそれがあります。

 禁止	<p>施療部位にアクセサリーなどの硬いものにつけて使用しない。 けがの原因になります。</p>
	<p>落としたり、強い衝撃をあたえない。 感電やショート、故障の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しない。 変色、変形の原因になります。</p>
	<p>使用中に電源プラグを抜かない。 けがのおそれがあります。</p>
	<p>水などをこぼしたり、ぬれたからだで使用しない。 感電やショート、故障の原因になります。</p>
 水場使用禁止	<p>浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電や故障の原因になります。</p>
 電源プラグを抜く	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 守らないとホコリや湿気で絶縁劣化による、漏電火災の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手で抜き差ししない。 守らないと感電ややけどのおそれがあります。</p>
	<p>停電のときはスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。</p>

各部の名称

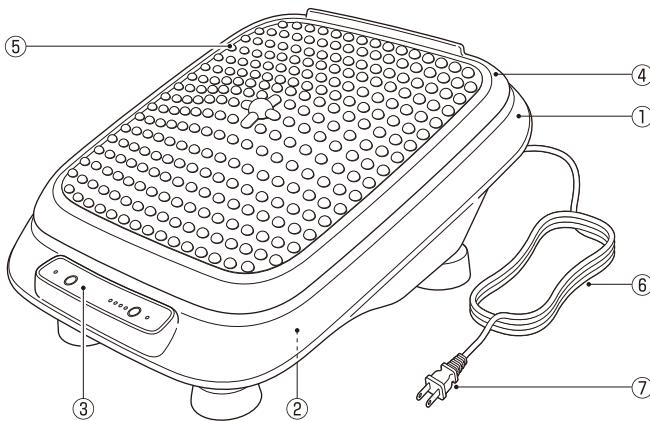

① 本体
② 主電源スイッチ(本体側面)
③ 操作パネル
④ 振動板
⑤ 指圧突起
⑥ 電源コード
⑦ 電源プラグ

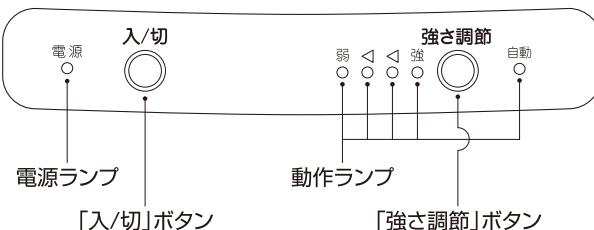

ご使用の前に

指圧突起部分をはずした状態や破損した状態で使用しないでください。
破損があるときはただちに使用を中止してください。

- 指圧突起部分をはずした状態で使用しないでください。
指圧突起部分が破損した場合は使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
- 施療部位にアクセサリーなどの硬いものにつけて使用しないでください。
事故やけが、故障の原因になります。
- 頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。

使いかた


●使用中の動作音をやわらげるためと、床を傷つけないためにマット等を敷くことをおすすめします。

- 1.電源プラグをコンセントに差し込んでください。(電源コードが抜け落ちないよう確実に接続する。)
- 2.本体側面にある電源スイッチを「ON」にしてください。操作パネルの電源ランプが点灯します。
- 3.「入/切」ボタンを押してください。自動コースでマッサージします。動作ランプが点灯します。
- 4.「強さ調節」ボタンを押してください。
ボタンを押すごとに[強～弱]の順番に切り替わります。
それぞれの動作ランプが点灯します。自動は[強～弱]をくり返して動作します。
- 5.使用後は「入/切」ボタンを押してください。動作ランプが消灯します。
- 6.電源スイッチを「OFF」にしてください。電源ランプが消灯します。
- 7.電源プラグをコンセントから抜いてください。

オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約20分で自動的に止まります。

使用例

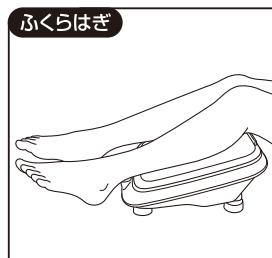

振動の刺激が強過ぎるときは、タオルなどをあてがい感触を調節してください。

お手入れについて

- ぬるま湯でうすめた少量の中性洗剤を柔らかい布にひたし、よく絞って汚れをふき取ってください。
その後、水をひたした布をよく絞ってふき、乾いた布で軽くふいてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。
変色、変形の原因になります。

保管について

- 子供のいたずらなどによる事故を防止するために、電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない所に保管してください。
- しばらくご使用にならない時はカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- 電源コードはねじれをほどいて保管してください。

故障かなと思ったら

機器に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源を切り、お買い上げ販売店に点検、修理を依頼してください。

症 状	調べるところ
●マッサージ動作時のモーター音	●構造上のもので機能等に影響はありません
●動作しない	●電源プラグが抜けていませんか ●電源スイッチが切れていませんか ●オートタイマーが働き停止状態になっていませんか

症 状	直し方
●連続使用後にマッサージが止まる	●モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています しばらく本体を休ませて(2時間程度)から再度動作を確認してください

上記点検後なお異常音、動作しないなどの異常を感じたらただちに使用を中止してください。
電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店に点検、修理を依頼してください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、
使用前に機器が正常に作動することを確認してください。



愛情点検

このような症状はありませんか。

- こげくさいにおいがする
- 電源コード、プラグが異常に熱い
- コードを動かすと通電したり、
しなかつたりする
- その他異常がある



故障や事故防止のため電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理をご相談ください。

仕様

販売名	ニューフットウェル MD-1800S
医療機器認証番号	221AGBZX00206000
一般的の名称	家庭用電気マッサージ器
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力	25W
定格時間	20分
オートタイマー	約20分
振動	強 約2150回／分 弱 約1250回／分
外形寸法	幅 約34cm×奥行 約40cm×高さ 約19cm
質量	約3.6kg
電源コード長さ	約2m
材質	本体:ABS樹脂
製造販売元	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)
保証書は所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
当社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで
各自治体の取り決めにしたがってください。

お客様ご相談センターのご案内

商品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

商品のお取扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル **0120-064-762**

※お客様がご加入されている電話(NTT以外の一般回線、PHSおよびIP電話など)によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

TEL 086-722-5110

FAX 086-722-3874

岡山大東電機工業株式会社

〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

【受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00】

都合によりお休みさせていただくことがあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

保証書

ニューフットウェル MD-1800S

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間

お客様	
フリガナ	
お名前	様
ご住所	〒
電話	
販売店	
販売店	

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、
お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
 - お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
 - 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
 - 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障または損傷。
 - 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。

販売元

株式会社 東京サプライズ

〒299-4202 千葉県長生郡白子町牛込 1856-7
TEL.0475-33-7101 FAX.0475-33-7102

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
お客様ご相談センター TEL.06-6783-8627