


REFRE HARMONY

リフレ ハーモニー

取扱説明書 保証書付

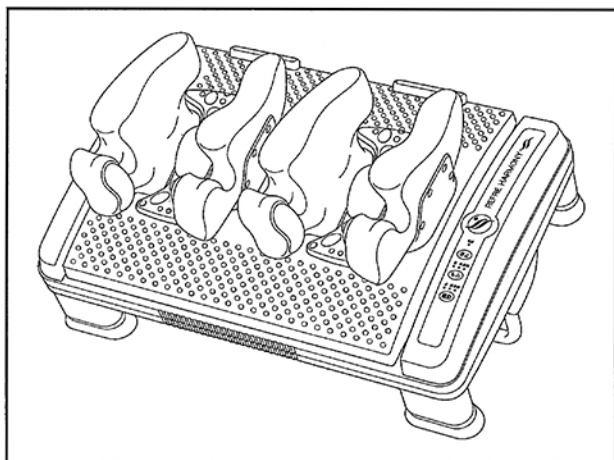

もくじ

● 安全上のご注意	1～3	● 効能・効果	6
● 各部の名称	4	● 愛情点検について	6
● 使いかた	4	● 仕様	6
● 使用例	5	● アフターサービスについて	6
● お手入れについて	5	● 保証書	裏表紙
● 保管について	5		

このたびはリフレハーモニーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。

絵表示の例



○記号は、「禁止」の行為であることを告げる内容です。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



強制

次の人は本機を使用しないでください。

- 脚部に静脈りゅう等の血行障害や、血栓症等のある人
- 医師が使用を不適当と認めた人

次の人は必ず医師に相談の上で使ってください。

- リューマチ症、外反母趾、痛風等により関節が変形している人
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
- 骨粗しょう症の人
- 熱の高い人
- 妊娠中や生理中の人
- 安静を必要とする人

	● 自覚症状の意思表示ができない人 ● 医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
	交流100Vで使用してください。 守らないと火災や感電の原因になります。
 禁止	マッサージ以外の目的には使用しないでください。 また、頭、胸、腹、骨部（ひじ、ひざなど）へは使用しないでください。 事故やけがのおそれがあります。
	布カバーが破れたり、はずれた状態で使用しないでください。 事故やけがのおそれがあります。
	子供や自分で操作できない人に使わせないでください。 また、幼児の手の届く範囲では使用しないでください。 事故やけがのおそれがあります。
	本体の上に立ったり、座ったりして使用しないでください。 転倒による事故やけがのおそれがあります。
	本体と振動板のすき間に手や足などを入れないでください。 事故やけがのおそれがあります。
	本体内部に金属類や燃えやすいものを入れないでください。 感電やショート、火災の原因になります。
	電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しないでください。 感電やショート、火災の原因になります。
	電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしないでください。 また、重いものを載せたり、熱器具に近づけて使用しないでください。 感電や火災の原因になります。
 分解禁止	絶対に分解や修理、改造をしないでください。 発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。


注意

 強制	1回の使用時間は15分以内にしてください。 また、一箇所への連続使用は3分以内にしてください。 守らないと逆効果やけがのおそれがあります。
	使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談してください。 守らないと事故や体調不良を起こすおそれがあります。

安全上のご注意

 強制	使用後は電源スイッチを「OFF」にしてください。 守らないと子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 守らないと感電やショートのおそれがあります。
 禁止	次のようなときは使用しないでください。 ● 疲労が激しいとき。 ● 酒に酔っているとき。 ● 湿疹が生じているとき。 体調不良を起こすおそれがあります。 食前、食後の1時間は使用しないでください。 体調不良を起こすおそれがあります。 使用中は眠らないでください。 事故やけがのおそれがあります。 強く押しつけて使用しないでください。 皮膚や筋肉を痛めるおそれがあります。 素肌では使用しないでください。また、大切な衣類の上からマッサージするときも、タオルなどをあてがい使用してください。皮膚や衣類を痛めるおそれがあります。 フタの中や、毛布をかぶせて使用しないでください。 発火やモーターの温度上昇の原因になります。 落としたり、強い衝撃をあてないでください。 感電やショート、故障の原因になります。 お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。 変色、変形の原因になります。 使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「OFF」にしないでください。 けがのおそれがあります。
 水場での使用禁止	浴室など湿気の多い場所やぬれた身体では使用しないでください。 感電やショート、事故の原因になります。
 電源プラグを抜く	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 守らないとホコリや湿気で絶縁劣化による、漏電火災の原因になります。 お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、ぬれた手で抜き差ししないでください。 守らないと感電やけがのおそれがあります。 停電のときは電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 守らないと停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。

各部の名称

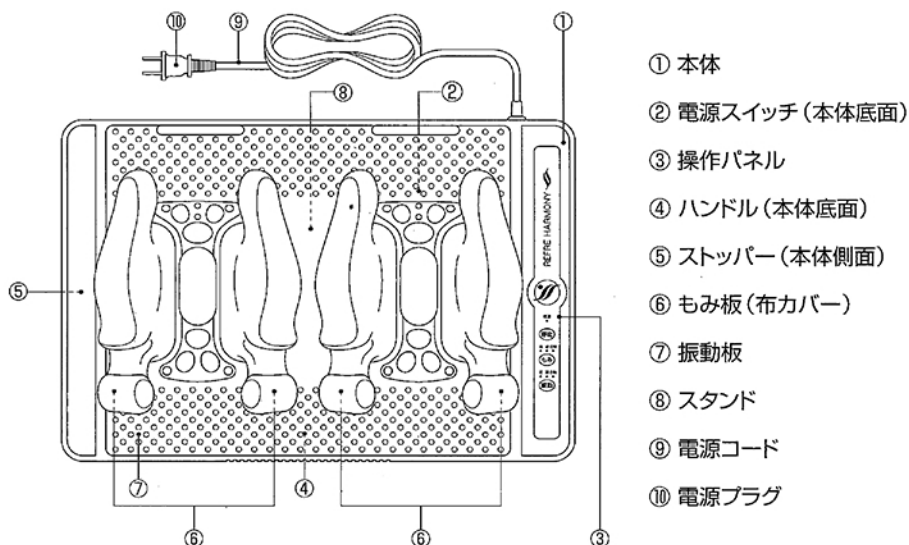

- ① 本体
- ② 電源スイッチ (本体底面)
- ③ 操作パネル
- ④ ハンドル (本体底面)
- ⑤ ストッパー (本体側面)
- ⑥ もみ板 (布カバー)
- ⑦ 振動板
- ⑧ スタンド
- ⑨ 電源コード
- ⑩ 電源プラグ

使いかた

- 足ウラ・側面使用の時、すべる場合はスタンドをたたんでご使用ください。
 - ふくらはぎ使用の時、スタンドを立ててご使用ください。
1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
 2. 本体底面にある電源スイッチを「ON」にしてください。電源ランプが点灯します。
 3. **もみ** ボタン(振動)ボタンを押してください。
 押すごとに[速 - 遅 - 自動 - 切]の順番に切り替わります。
 又**もみ**使用時、効果を高めるため途中で静止状態になりますが故障ではありません。
 ○パイプの自動コースの動作
 段階(遅・中・速)がランダムに設定されています。
 ○もみの自動コースの動作
 段階(遅・中・速・静止)がランダムに設定されています。
 ※**もみ**遅動作の時も静止が設定されています。
 4. **停止** ボタンを押すともみ板が開いた状態で停止します。
 使用後は電源スイッチを「OFF」にしてください。電源ランプが消灯します。
 5. 電源プラグをコンセントから抜いてください。

オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約15分で自動的に止まります。

保証書

リフレハーモニー・MD5101

お買上げ日	保証期間
年 月 日	お買上げ日より1年間(縫製部品は除きます。)

お客様

フリガナ

お名前

様

ご住所 〒

電話 () —

販売店

販売店に記入のない場合は、送り状の控を販売店の欄に貼付してください。

万一、送り状を紛失された場合でも、お名前とお買上げ日が確認できれば、ご購入の方の名簿が管理されておりますので保証期間中に故障されても、本書記載内容で無料修理させていただきます。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参のうえお買上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - ・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
 - ・お買上げ後の輸送、落下等による損傷。
 - ・火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
 - ・一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障または損傷。
 - ・指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。



発売元

株式会社 東京ザンライズ

〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-12-6(サンライズビル)

TEL.03-5821-7140 FAX.03-5821-5390